

Máquina computarizada para pruebas de impacto Charpy XJD-50P

Introducción


Este probador se utiliza para probar o determinar la capacidad anti-impacto de materiales no metálicos como el plástico duro, nylon mejorado, cerámica, vidrio templado y dieléctrico, o aceros de baja energía de impacto, no ferrosos y de baja emisión de carbono. Utilizado principalmente por los institutos científicos de investigación, colegios, universidades y muchos laboratorios de materiales no metálicos.

Función

- Controlada por computadora, puede almacenar 5000 datos, sistema Windows XP, puede introducir diferentes parámetros de prueba, calcula automáticamente la energía de impacto, genera e imprime automáticamente el informe de prueba
- Cumple con las normas ISO179, ISO9854-1
- Adopta la tecnología de ángulo lateral giratorio en la rejilla codificadora, es de alta precisión y fiabilidad con un amplio rango de medición;
- Indica la energía de impacto, resistencia al impacto, ángulo inicial, aumento de ángulo, pérdida de energía, etc.
- Corrige de forma automática la pérdida de energía; imprime y guarda los registros de manera automática.


Especificaciones

Energía de impacto	7,5 J, 15J, 25J, 50J
Velocidad de impacto	3.8m / s
Angulo	160 °
Modo de visualización	Pantalla digital LCD
Distancia entre centros de péndulo y muestra	380mm
Momento del péndulo	Pd7.5 = 3.8662N.m PD15 = 7.7324N.m PD25 = 12.8888N.m PD50 = 25.777N.m
Lapso de la muestra	40mm, 60mm, 70mm, 95mm
Apoyo radial de la cuchilla	R = 1mm
Ángulo de la cuchilla de impacto	30 °
Radio de la cuchilla de impacto	R = 2 mm
Liberación del péndulo	interruptor electrónico
Fuente de alimentación	110V, 60Hz, monofásica

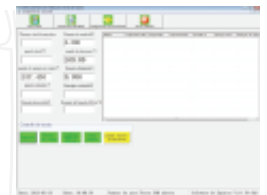

Entrega estándar

- Marco principal: 1 juego
- Péndulo de impacto 7,5 J, 15J, 25J: 1 juego cada uno
- Asiento móvil: 4 juegos
- Placa de centrado: 1 juego
- Llave hexagonal: 1 juego
- Cable de alimentación: 1 pc
- Manual de Operaciones: 1 pc
- Lista de embalaje: 1 pc.

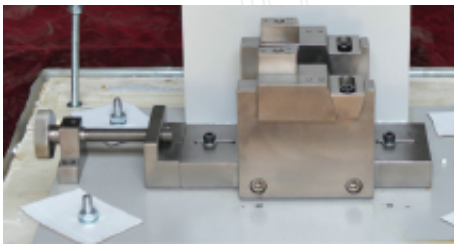

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
 Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
 Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633