


INTRODUCTION

CST-50 Projector is a supplemental equipment for impact test, mainly used to check the accuracy of impact specimen U/V notch.

Put the notch specimen on projector working table, multiple 50* and compare the projection image with standard plate, then identify the quality of impact specimen notch.

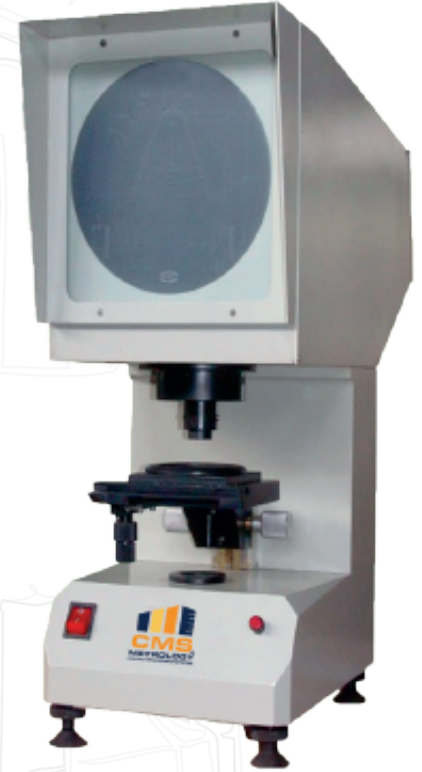

SPECIFICATIONS

Projector screen diameter	180mm
Size of working table	
Square working table diameter:	90mm
Square working table dimension:	110x125mm
Glass diameter:	70mm
Stroke of working table	
Longitudinal:	±10mm
Transverse:	±10mm
Elevating:	± 12mm
Working table moving	0°-360°
Magnifying multiplication	50x
Light source (tungsten-halogen lamp)	12V 100W
Power	110V 60HZ
Dimensions	515 x 224 x 603 mm (L x W x H)
Weight	18kg

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536

Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

MAIN ACCESORIES

Frame	1
Power Cord	1
Halogen Lamp	2
Plane glass plate	1
English operation manual	1



LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: [-52] 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536

Querétaro: [-52] 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678

Puebla: [-52] 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx

www.controly medicion.com.mx