


## Introducción

La máquina de corte de precisión automática JMQ-60Z está controlada por un solo chip, que es adecuada para el corte deformable preciso de metales, componentes electrónicos, materiales cerámicos, cristales, carburos cementados, rocas, minerales, hormigón, materiales orgánicos, materiales biológicos (dientes, huesos) y otros materiales.

Esta máquina corta a lo largo del eje Y, que tiene una alta precisión de posicionamiento, un amplio rango de regulación de velocidad y una gran capacidad de corte con el control y la pantalla táctil. La cámara de corte adopta una estructura totalmente cerrada con interruptor de límite de seguridad y ventana transparente para observación. Con el sistema de enfriamiento por circulación, la superficie de la muestra cortada es brillante y lisa sin quemaduras. Es la selección clásica de máquina cortadora automática de sobremesa.

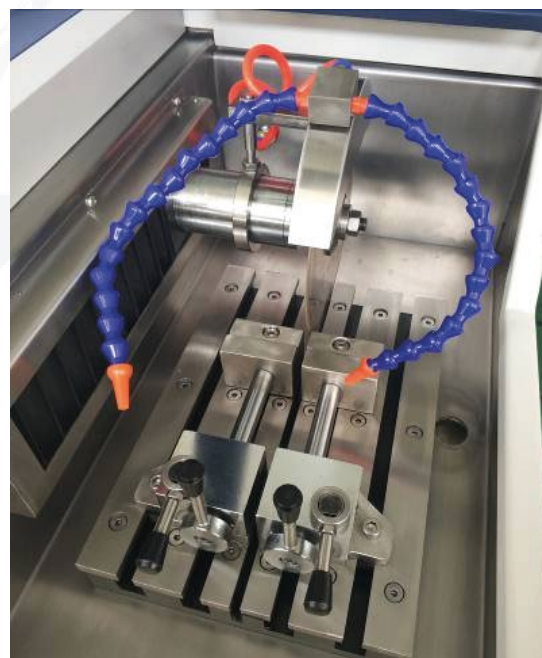

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

## Parametros Tecnicos

Modelo	JMQ-60Z
Método de corte	Alimentación automática del husillo a lo largo del eje Y
Velocidad de alimentación	0,7-36 mm / min (paso 0,1 mm / min)
Rueda de corte	Φ205×1.2×Φ32mm
Max. Capacidad de corte	Φ 60mm
Recorrido del eje Y	200mm
Alcance del husillo	125mm
Eje de velocidad	500-3000r/min
Potencia del electromotor	1300W
Mesa de corte	320 × 225 mm, ranura en T de 12 mm
Herramienta de sujeción	Abrazadera rápida, altura de la mandíbula 45 mm
Control y visualización	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz, 10 A (380 V opcional)
Dimensiones	850×770×460mm
Peso neto	140kg

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**

Capacidad del tanque de agua	36L
Flujo de la bomba	12L/min
Dimensiones del tanque de agua	300x500x450mm
Peso del tanque de agua	20kg

## Lista de empaque

Nombre	Especificación	Cantidad
Cuerpo de la máquina		1 set
Depósito de agua		1 set
Rueda de corte	Ø205 × 1.2 × Ø32mm Disco de corte de resina	2 pcs
Fluido de corte	3kg	1 bottle
Llave	14x17mm, 17x19mm	cada 1 pc
Inner Hexagon Spanner	3mm, 6mm	cada 1 pc
Tubería de entrada de agua	1/2 tubo de metal	1 pc
Tubería de salida de agua	Ø32mm	1 pc
Manual de instrucciones de uso		1 copy

**Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE**